




	CAROLIFT 6000	CAROLIFT 6900
Max. Kapazität	181 kg	181 kg
Justierbare Höhe	Ja	Ja
Justierbare Höhe des Krankopfs	Ja	Ja
Justierbarer Winkel des Krankopfs	Ja	Ja
Elektrisch betriebenes Schwenken	Ja	Ja
Elektrisch betriebenes Heben/Senken	Ja	Ja
Elektrisch betriebener Teleskop-Krankopf	Nein	Ja, 15 cm
Zusammenklappbarer Krankopf	Ja	Nein
Justierbare Endposition zum Schwenken bis zu 360 Grad	Ja	Ja

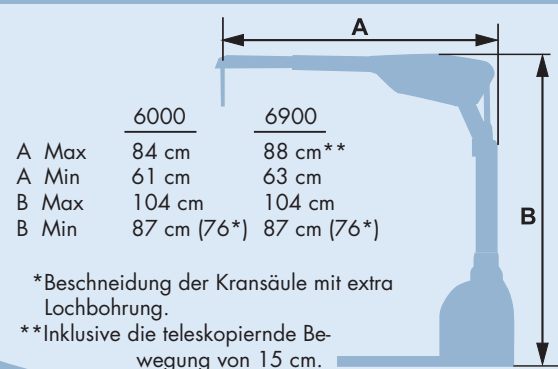

Carolift 6000 und 6900 sind gemäß der amerikanischen Fahrzeugvorschrift FMVSS geprüft und zugelassen.

Sie erfüllen auch die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit).

Die Kräne tragen das CE-Kennzeichen.



*Beschneidung der Kransäule mit extra Lochbohrung.

**Inklusive die teleskopierende Bewegung von 15 cm.

CAROLIFT®

6000 und 6900

Ein Rollstuhlkran, der dank seines Designs auch bei sehr schrägen Heckklappen installiert werden kann



Besuchen Sie
unsere Website
www.autoadapt.de



Autoadapt AB

Hedeforsvägen 6
S-443 61 Stenkullen, Schweden
Tel: +46 302 55820 Fax: +46 302 55829
E-post: contact@autoadapt.se
www.autoadapt.com
www.autoadapt.de



IDEEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

CAROLIFT® 6000 und 6900

Ein- und Ausladen von der Fahrzeugseite

Carolift 6000/6900 besitzt einen gewinkelten Kranarm (zwei „Ellenbogen“), mit dem sich ein Rollstuhl von der Fahrzeugseite aus ein- und ausladen lässt. Sie können also den Rollstuhl auf dem Bürgersteig stehen lassen und müssen ihn nicht auf die Straße hinunterfahren.



Carolift 6000 lädt ein Carony-Go-Fahrgestell vom Bürgersteig ein.

Hebekapazität 181 kg

Anpassbar

Die Kransäulenhöhe und die Kranarmlänge sind justierbar, um problemlos an verschiedene Kombimodelle angepasst werden zu können. Der Krankopf kann zudem abgewinkelt werden, um der Türöffnung besser zu folgen.

Dank der Form des Kranarms kann der Kran auch in Kombis mit besonders schräger Heckklappe montiert werden.

Carolift 6900 besitzt einen teleskopischen Krankopf, der den Einsatz in Fahrzeugen mit schmaler Hecköffnung oder vorstehenden Stoßfängern ermöglicht.



Carolift 6000 hat eine Hebekapazität von 181 kg. Carolift 6900 (Teleskop-Krankopf) hat eine Hebekapazität von 181 kg.



Dank des teleskopischen Krankopfes ist der Kran für Fahrzeuge mit schmaler Hecköffnung oder vorstehenden Stoßfängern geeignet.

Hehebalken Die Hehebalken sind für verschiedene Rollstuhl-/Scootermodelle angepasst. Diese werden separat bestellt.

<p>Hehebalken mit 4 Gurten 180 kg. Elektrorollstühle mit festem Sitz</p>	<p>C-Arm und T-Stange 180 kg. Scooter und Elektrorollstühle</p>	<p>Kralle und T-Stange Scooter mit abnehmbarem Sitz. 180 kg.</p>	<p>Carony Hehebalken Für das Carony-Fahrgestell.</p>
---	--	---	---

Zusammenklappbarer Krankopf

Der Krankopf des Carolift 6000 kann zusammengeklappt werden, wenn der Kran nicht genutzt wird. So bleibt viel Platz im Kofferraum.



Der Carolift 6000 lädt das Fahrgestell des Elektrorollstuhls Carony Go in einen Peugeot 406 mit schräger Heckklappe.

Zuverlässigkeit und Sicherheit

Ein robustes Getriebe macht die Kransteuerung zuverlässig und wartungsfrei.

Die Kräne sind mit einem widerstandsfähigen schwarzen Lack oberflächenbehandelt.

Die Kräne sind geprüft und tragen das CE-Kennzeichen. Die Kranmontage geschieht auf einer stabilen Montagekonsole mit mehreren Befestigungspunkten im Fahrzeug.

Die Geschwindigkeit des Krans kann vom Monteur gemäß dem Bedarf des Anwenders programmiert werden.

